

## Table des matières

Technologie RPL™ (Lumière Pulsée Réactive) - Comment ça marche?	2
Utilisation Prévue	3
Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?	4
CONTRE-INDICATIONS	4
MISES EN GARDE	6
PRÉCAUTIONS	9
Possibles effets secondaires	11
Description du dispositif	12
Consignes d'utilisation	14
Test préalable	14
Préparons-nous	15
Étape 1 Préparez votre peau	15
Étape 2 Fonctionnement du dispositif	16
Nettoyage & Rangement	20
Dépannage	20
Service clientèle	21
Paramètres et spécifications du dispositif	22
Étiquetage	23


## Technologie RPL™ (Lumière Pulsée Réactive) – Comment ça marche?

La RPL™ (Lumière Pulsée Réactive) est une technologie avancée qui utilise une technique cliniquement prouvée, l'IPL (Lumière Intense Pulsée) conjointement à une sonde de pigmentation et de contact avec la peau. La lumière émise par le dispositif pénètre la peau où elle est absorbée par la mélanine pigmentaire dans la tige du poil. La chaleur produite par cette lumière entre dans le follicule et génère un effet thermique local autrement connu comme photo-thermolyse sélective. L'effet thermique désactive le follicule pileux provoquant une réduction de croissance du poil tout en laissant l'environnement cutané intact et frais.

### **Réduction de pilosité à long terme – Cycle de croissance du poil**

Deux facteurs jouent un rôle majeur dans l'optimalisation de la réduction de pilosité à long terme:

- **Cycle de croissance du poil.** La croissance du poil se déroule en trois phases: Anagène, Catagène et Téloène. La phase anagène est de croissance tandis que la catagène et la téloène sont des phases de repos. La réduction permanente de la pilosité ne peut se produire que durant la phase d'anagène, la phase de croissance. Puisque la croissance des poils n'est pas synchronisée, il est recommandé de mener à bien le protocole de traitement complet pour garantir une exposition de tous les poils à celui-ci durant sa phase d'anagène.
- **Pigmentation de la peau selon le phototype de Fitzpatrick.** Les peaux plus sombres contiennent plus de mélanine qui contrecarre l'absorption de l'énergie par le poil ciblé. Plus grande est la quantité d'énergie absorbée par la peau, plus grand est le risque d'apparition d'effets indésirables.

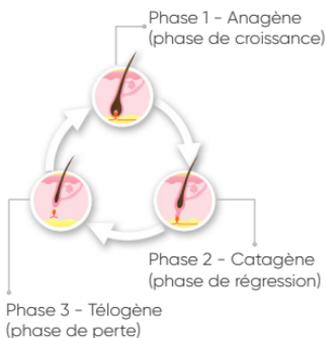

Prenez soin de lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer à utiliser le dispositif. Le guide d'utilisation est à votre disposition sur le site: [www.sensica.com](http://www.sensica.com)

permises du visage (au-dessus de la lèvre supérieure, joue, mâchoire, menton et cou).

**Remarque** : Le dispositif est spécialement conçu pour vos propres soins personnels, il est destiné à un seul utilisateur et à une utilisation uniquement chez soi.

Le dispositif est destiné à une utilisation sur des pigmentations de peau de type I à V selon le phototype de Fitzpatrick ci-dessous (diagramme coloré disponible dans la couverture). Ne pas utiliser sur des peaux sombres comme celles de type VI. L'utilisation des dispositifs IPL sur une peau naturellement sombre est interdite.

## Utilisation Prévue

Ce dispositif est considéré comme un dispositif dépourvu de visée médicale. C'est un dispositif destiné à ôter une pilosité indésirable chez soi.

Le dispositif est destiné à une utilisation sur la totalité du corps (soit, les jambes, les bras, les aisselles, la bande maillot, le dos, les épaules, le thorax, le ventre) et sur les zones

Couleur de peau



Couleur des cheveux



Le dispositif fonctionne mieux sur les pilosités sombres ou sur des poils à forte concentration de mélanine. Les poils châtain et brun clair répondent, mais demandent habituellement plus de séances de soin. Les poils roux montrent quelques réponses, tandis que les poils blancs, gris ou blonds montrent un taux de réponse limité. Certains utilisateurs ont toutefois remarqué une réduction de la pilosité après de multiples séances de soin.

**Remarque :** L'épilation au moyen du laser ou de Lumière Intense Pulsée peut stimuler la croissance des poils chez certaines personnes. Sur la base des données actuelles, les groupes à plus haut risque, relativement à cette réponse, sont constitués de femmes de descendance méditerranéennes, moyen-orientales et sud-asiatiques sur le visage et le cou desquelles le soin est appliqué.

## Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?

Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer un traitement avec le dispositif. Si vous avez le moindre doute, et que vous n'êtes pas certain que le dispositif convient à votre santé, parlez-en avec votre médecin.

## CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez PAS, si vous:

- Avez un implant actif tel qu'un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou tout dispositif similaire, puisqu'il pourrait produire des interférences.
- Êtes enceinte, avez une chance de l'être ou allaitez, puisque le dispositif n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes et est susceptible de stimuler la pigmentation.
- Avez un cancer de la peau, ou sur des zones susceptibles de malignité, ou si vous avez été l'objet d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie durant les 3 derniers mois, puisque l'innocuité n'a

pas été établie et que le système immunitaire peut-être défaillant, ce qui peut conduire à de graves blessures.

- Souffrez d'épilepsie, le dispositif pouvant déclencher une crise.
- Avez une peau abimée ou coupée, ou des antécédents de poussées d'herpès ou de psoriasis sur la zone de soin puisqu'une telle utilisation peut entraîner de graves effets secondaires.
- Souffrez de formations chéloïdiennes (excroissance tissulaire apparue par suite de la cicatrisation d'une plaie) sur la zone de traitement puisque cette utilisation n'a pas été déterminée et que de graves complications pourraient survenir au niveau de la peau.
- Avez pris des antibiotiques à base de tétracycline ou quelque autre médicament contenant un des principes actifs suivant durant les quinze derniers jours : acide rétinoïque, retin-A, vitamine A (telle que l'isotrétinoïne) puisqu'ils sont considérés être des médicaments

photosensibles et que des lésions cutanées peuvent en découler.

- Êtes photo sensible ou souffrez d'autres troubles liés à la sensibilité à la lumière, puisque l'utilisation du dispositif dans ces conditions pourrait se conclure par de graves blessures.
- Souffrez de troubles graves, ou de décompensation, du métabolisme tel un diabète puisque cela pourrait se conclure par un plus grand risque de retard de guérison et d'infection en cas d'effet secondaire.
- Avez une peau ayant fait l'objet d'une procédure d'exfoliation durant les 8 dernières semaines sur la zone de traitement puisque cela pourrait dans ces circonstances, se conclure par une stimulation de la pigmentation.

**Remarque :** Si vous avez suivi toute autre procédure esthétique ou doutez de possibles effets secondaires, consultez votre médecin avant d'utiliser le dispositif.

## MISES EN GARDE

N'utilisez PAS le dispositif:

- Sur une peau naturellement noire (diagramme coloré disponible dans la couverture).
- Si votre peau laisse apparaître des taches brun foncé ou noir comme les aréoles, des taches de rousseur, de naissance, un naevus, un phlyctène, sur la zone de soin.
- Sur des muqueuses comme les: narines, lèvres buccales, paupières, yeux, organes génitaux ou l'anus, puisque vous seriez alors exposé à des risques de graves lésions.
- Sur une zone de soin présentant un piercing ou un corps métallique, tel que des boucles d'oreilles ou un bijou, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure. Sur une zone tatouée ou avec un maquillage permanent, recouvrez la zone tatouée ou d'un maquillage permanent avec un adhésif blanc avant le

traitement. N'utilisez pas le dispositif directement sur un tatouage ou un maquillage permanent, même s'il est recouvert.

- **Sur une peau bronzée ou récemment exposée au soleil car cela peut causer de graves brûlures ou lésions cutanées. Évitez les expositions prolongées au soleil de plus d'un quart d'heure durant les 4 semaines précédant le soin et au moins durant les quinze jours suivant celui-ci. Si durant cette période la peau ayant fait l'objet du soin devait être exposée au soleil, prenez soin d'y appliquer en préalable une crème solaire d'indice de protection 30 au moins.**

En complément:

- Ne regardez en aucun cas la lumière directement issue de l'applicateur et de la lampe, car cela pourrait causer des lésions oculaires.
- N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type acétone, sur la peau, une

heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

- N'appliquez pas le soin plus d'une fois sur la même zone lors d'une même séance puisque cela pourrait générer des effets indésirables.

## PRÉCAUTIONS

- **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- Ce dispositif n'est pas destiné à une utilisation par des personnes ayant des capacités physiques, sensibles ou mentales réduites.
- Ne placez, ne rangez, et n'utilisez pas ce dispositif à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque de grave électrocution.
- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux susceptibles de provoquer de sérieux dommages corporels.
- Ne laissez pas le dispositif branché sans surveillance car il y a un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas le dispositif si l'une de ces pièces ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, semble endommagé, cassé, desserré, incomplet ou humide (faites d'autant plus attention puisque des UV et IR sont émis depuis le dispositif) ou si vous voyez ou sentez de la fumée.
- N'utilisez pas ce dispositif avant d'avoir fait en sorte qu'il soit propre, sec et intact. Les consignes de nettoyage sont énoncées au chapitre **Nettoyage & Rangement**.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

## Possibles effets secondaires

Lorsque vous utilisez ce dispositif en observant les consignes du Guide d'utilisation, les effets secondaires sont rares. Toutefois un certain degré de ressenti d'effets indésirables peut découler de toute procédure esthétique (tels que listés dans le tableau ci-dessous). Au cas où des effets secondaires apparaissent, cessez d'utiliser le dispositif, et si nécessaire, consultez votre médecin.

Des effets secondaires légers peuvent apparaître spontanément après quelques heures.

Gravité de l'effet secondaire	Fréquence de l'effet secondaire	Effets secondaires
Léger	Commun	Irritation cutanée Rougeur cutanée Sensibilité cutanée
Modéré	Rare	Brûlure cutanée Scarification Changements dans la pigmentation Rougeurs et gonflements excessifs
Grave	Extrêmement rare	Infection Meurtrissure

Tout incident grave qui survient en relation avec le dispositif doit être porté à notre connaissance (via le service client).

## Description du dispositif

- 1 Bouton Marche/Arrêt et de niveau d'énergie
- 2 Bouton déclencheur
- 3 Indicateur de statut:
  - Absence de contact;
  - Pigmentation non-autorisée;
  - Dispositif inutilisable
- 4 Témoins de niveau d'énergie 1-3
- 5 Sonde de pigmentation et de contact (sonde Fitzpatrick)
- 6 Fiche d'alimentation
- 7 Fenêtre de traitement
- 8 Lampe



## Description de l'interface utilisateur

1. **Bouton ON/OFF et sélection d'énergie** – Une pression sur le bouton met le dispositif en marche (ON) au niveau d'énergie 1. Chaque pression change le niveau d'énergie du plus faible au plus fort pour un total de trois différents niveaux d'énergie. Sélectionnez le niveau d'énergie selon celui que vous avez trouvé le plus confortable lors du test préalable. Les indicateurs d'affichage de niveau d'énergie s'allument en vert selon le niveau d'énergie sélectionné (ex., au niveau d'énergie 1, une lumière verte est allumée, au niveau d'énergie 2, deux lumières vertes sont allumées). Le dispositif passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé depuis 3 minutes ou en maintenant la pression sur le bouton ON/OFF durant 3 secondes.

**2. Le Bouton déclencheur** – (activation de l'impulsion flash) repérée par un soleil sur le haut du dispositif. Le Bouton déclencheur active la lampe flash si la fenêtre de soin et en parfait contact avec la peau et que la pigmentation de la peau est dans la marge autorisée. Une unique pression sur le bouton activera un seul flash, le maintien de la pression activera des flashes continuel aussi longtemps que la pression durera.

Indicateur de Statuts	État	Description
<b>Aucun témoin allumé</b>	ARRÊT (off)	Le dispositif ne fonctionne pas (absence de branchement à l'alimentation).
<b>Lumière verte Fixe</b>	MARCHE (on)	Le flash est prêt à être émis.
<b>Lumière verte clignotante</b>	Veille	Le dispositif est en mode veille (avant de l'utiliser ou lorsqu'il n'est pas utilisé depuis plus de 3 minutes).
<b>Lumière orange temporaire</b>	Le flash est bloqué	Le contact du dispositif sur la peau n'est pas complet – aucun flash ne sera produit.
<b>Lumière orange clignotante</b>	Proximité d'atteinte de la limite de longévité	Indique la proximité de la fin de durée de vie de la lampe.

## Consignes d'utilisation

Le dispositif convient pour une utilisation sur les : jambes, les aisselles, la bande maillot, le dos, le thorax le ventre et les zones permises du visage (au-dessus de la lèvre supérieure, joue, mâchoire, menton et cou).

### Qu'en attendre

Lors du soin, il est normal de constater:

- Un flash lumineux accompagne chaque pression sur le bouton déclencheur - la lumière émise ne blessera pas vos yeux.
- Un pop s'entend lors de chaque flash lumineux.
- Une légère sensation de picotement.

### Test préalable

Le test préalable est destiné à déterminer la réactivité de votre peau à un traitement avec le dispositif et vous aider à établir le niveau d'énergie optimal pour chaque zone de soin.

Réalisez un test préalable sur une portion cachée de la zone sur laquelle vous avez

l'intention de d'appliquer un soin, 48 heures avant de réaliser le premier soin entier.

Du fait de la variété de niveaux de sensibilité, les zones du corps requièrent différents niveaux d'énergie ; lesquels seront déterminés par des tests préalables distincts.

**Remarque:** N'appliquez nul soin sur une zone complète à un niveau d'énergie que vous n'auriez pas préalablement testé!

N'apportez pas de traitement à la zone testée durant au moins 48 semaine après que le test préalable a été réalisé.

1. Préparez votre peau comme décrit dans "Étape 1 : Préparez votre peau". Les instructions relatives à l'utilisation du dispositif se trouvent à "Étape 2 : Fonctionnement du dispositif".
2. Sélectionnez le niveau d'énergie le plus bas et déclenchez le flash.
3. Vous pouvez augmenter le niveau d'énergie tout autant que vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'au niveau d'énergie maximum

- à moins que vous ne ressentiez un désagrément.
4. Si ressentez un désagrément ou constatez un effet indésirable tel qu'une forte rougeur ou la formation de cloques, cessez immédiatement le test.
  5. Attendez 48 heures et examinez la zone testée:
  6. Si la peau sur la zone de test semble normale (il n'y a aucune réaction ou seulement une légère rougeur), vous pouvez procéder au soin complet au niveau d'énergie essayé le plus haut restant confortable.
  3. N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou d'acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

**Important:** N'utilisez aucune crème ou gel durant le soin, puisque cela pourrait nuire au fonctionnement normal du dispositif

**Souvenez-vous:** Le dispositif est équipé d'une sonde de pigmentation intégrée, permettant le fonctionnement du dispositif seulement sur les peaux dont la pigmentation est appropriée. Cette fonctionnalité de sécurisation unique empêche l'émission d'un flash sur une zone spécifique où la peau est trop sombre ou trop bronzée, même si votre peau est plus claire dans l'ensemble.

## Préparons-nous

### ÉTAPE 1 PRÉPAREZ VOTRE PEAU

1. Enlevez tout bijou.
2. Veillez à ce que toute pilosité cutanée sur la zone de traitement ait été rasée ou coupée (entre les traitement vous pouvez raser mais pas utiliser de cire ou d'épilation) et que votre peau est propre et exempte de tout résidu: crème,

## ÉTAPE 2 FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

1. Remarque : Un test préalable doit être réalisé avant de procéder au soin complet. Consultez le paragraphe "**Test Péalable**" ci-dessus. Veillez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact.
2. Mettez en marche le dispositif, sur ON. Lorsque le dispositif est en marche, il va s'établir automatiquement sur le niveau d'énergie et ce dernier sera indiqué par un témoin vert. Changez manuellement les niveaux d'énergie en appuyant sur le bouton "ON/OFF" et de sélection d'énergie. Vous devez diminuer ou augmenter le niveau d'énergie sur la base de votre niveau de confort comme déterminé lors du test préliminaire.
3. Placez la fenêtre de traitement sur la zone de soin déterminée, en veillant qu'elle soit parfaitement en contact avec la peau. Par précaution pour votre sécurité, le dispositif est équipé d'une sonde de sécurité qui ne déclenche pas le flash si:
  - Le dispositif n'est pas correctement appliqué sur la peau. Dans ce cas, l'indicateur de statut devient "momentanément" orange.
  - La pigmentation de votre peau est trop foncée/ bronzée. Dans ce cas, l'indicateur de statut devient "momentanément" rouge.
4. Appliquez fermement la fenêtre de traitement sur votre peau et appuyez sur le bouton déclencheur pour émettre le flash. Après chaque flash, déplacez le dispositif jusqu'au point suivant. Après chaque flash, le dispositif prend 1 à 3 secondes avant d'être prêt pour le prochain flash.
5. Pour des flashes en continu, maintenez le bouton pressé et commencez de déplacer le dispositif appliquant chaque flash à un nouveau point sans éloigner la fenêtre de soin de la peau. Le dispositif se recharge immédiatement et se tient prêt pour le prochain flash. Répétez le processus jusqu'à ce que la totalité de la zone ait été couverte.

- Après le traitement, éteignez le dispositif en appuyant sur le bouton "ON/OFF". Débranchez le dispositif après chaque séance de soins.
- Réalisez les sessions de traitement selon le chapitre "**Traitement Recommandé**"

**Remarques importantes:**

Faites en sorte que les impulsions ne se chevauchent pas - les impulsions répétées sur un même point peuvent causer des brûlures.

**Traitement recommandé:****Pilosité corporelle:**

Les traitements épilatoires 1 à 4, seront appliqués à deux semaines d'écart l'un de l'autre.

Les traitements épilatoires 5 à 8, seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.

**Pilosité faciale:**

Les traitements épilatoires 1 à 5, seront appliqués à deux semaines d'écart l'un de l'autre.

Les traitements épilatoires 6 à 8, seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.

**Qu'en attendre:**

Des personnes différentes et des zones de traitement différentes ne peuvent pas réagir de la même façon au traitement RPL.

Vous devriez remarquer une réduction de la croissance pileuse au bout du 6<sup>me</sup> traitement. Une fois que le protocole de 12 traitements est terminé, vous devriez constater une réduction de croissance accrue. Tout poil restant devrait être plus fin et moins coloré. Afin de maintenir les résultats, nous recommandons d'utiliser le dispositif une fois par mois par zone de traitement.

**Important:** Les traitements sur le visage doivent être réalisés à des niveaux d'énergie bas ou moyen.

**Remarques:**

- Il est recommandé d'utiliser le réglage l'énergie le plus élevé que vous sentiez être le plus confortable durant le test préalable.
- Les poils de couleur plus claire peuvent demander un plus grand nombre de soins avant que le résultat soit visible.

- Cela peut prendre 3 à 4 traitements (6 à 8 semaines) avant que les premiers résultats soient visibles. Les poils continueront de pousser jusqu'à deux semaines après la séance de réduction. Toutefois, à mesure de votre progression dans le protocole de soin complet, vos poils vont naturellement et graduellement tomber. Le temps pour que de premiers résultats soient visibles varie selon les utilisateurs et dépend de facteurs tels que : âge, couleur du poil et pigmentation cutanée.
- Le nombre de séances nécessaires pour parvenir à un résultat à long terme diffère pour chaque zone de traitement et pour chaque personne.
- Le dispositif convient aux hommes. Toutefois, la pilosité masculine, particulièrement celle du thorax, réclamera un plus grand nombre de séances de soin.
- Des séances d'entretien seront de temps en temps nécessaires si la croissance demeure visible.

### **Soin du visage**

La peau du visage est une zone sensible qui nécessite de l'attention et des précautions particulières. Faites en sorte de suivre scrupuleusement les consignes et les mises en garde afin d'éviter les effets indésirables. Il est recommandé de débiter par le soin sur le corps et ainsi se familiariser avec le déplacement du dispositif pour ensuite réaliser le soin du visage.

Le dispositif peut être utilisé pour apporter, un soin sur toutes les zones du visage en dessous de la ligne des pommettes, soit au-dessus de la lèvre supérieure, les joues, la mâchoire, le menton et le cou.



N'utilisez jamais le dispositif autour ou à proximité des yeux.  
Avertissements !

### Avertissements!

- Lors de l'utilisation du dispositif sur les zones du visage, n'utilisez pas de niveaux d'énergie dépassant le niveau moyen, parce qu'il pourrait provoquer de graves lésions cutanées.
- N'utilisez pas le dispositif sur le visage au-dessus des pommettes ou autour des yeux, sourcils et cils, cela pourrait se conclure par de graves lésions oculaires.
- Évitez les narines et la pulpe des lèvres puisque ces zones sont plus sensibles.
- La peau du tiers inférieur du cou est plus sensible. Apportez une attention particulière à ne pas chevaucher les zones de traitements.



**Remarque:** La pilosité du visage peut être hormonale et de la sorte réclamer plus de séances pour parvenir à une réduction capillaire permanente.

**Pour monsieur:** Faites attention lors de la délivrance du soin sur la zone barbue, la densité de croissance des poils implique une grande quantité de mélanine qui absorbe la chaleur durant le traitement.

#### Soins post-traitement

- Après le traitement, vous pouvez utiliser une lotion apaisante ou essayer la lotion Post RPL de Sensica (disponible sur [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).
- Évitez les crèmes ou de produits épilatoires ou éclaircissants ou produits similaires durant au moins 24 heures, puisque cela irrite la zone de soin.
- Évitez les expositions au soleil durant les quinze jours suivant le soin. Durant cette période, si la partie du corps ayant fait l'objet du soin devait être exposée à la lumière du soleil, appliquez une crème solaire

d'un indice de protection au moins égal à IP 30.

## Nettoyage & Rangement

1. Prenez soin de mettre le dispositif sur OFF et de le débrancher avant le nettoyage et le rangement.
2. Il est recommandé de nettoyer la fenêtre de traitement après chaque séance en utilisant un chiffon propre et sec.
3. S'il y a de la saleté ou des débris sur la fenêtre de traitement, nettoyez la fenêtre de traitement. Si vous ne pouvez pas nettoyer le dispositif, contactez notre Service Clientèle.

## Dépannage

### Si le dispositif ne peut être mis sous tension:

- Veillez à ce que le cordon soit correctement enfilé d'une part dans le dispositif et d'autre part dans la prise murale.
- Veillez à ce que la prise murale soit alimentée.

### Si le dispositif ne déclenche pas d'impulsion:

- Veillez à ce que le dispositif soit parfaitement en contact avec votre peau. Le bouton déclencheur n'active d'impulsion que si le dispositif est en parfait contact avec la peau.
- Vérifiez que la zone sur laquelle vous essayez d'appliquer le soin n'est ni trop petite, ni trop courbe, ni trop osseuse. La totalité de la zone de traitement doit toucher la zone de traitement, étirez la peau peut aider à y parvenir.
- Si la pigmentation cutanée identifiée par la sonde de pigmentation et de contact est trop sombre, l'activation du flash est bloquée, et l'indicateur de statut passe "momentanément" à rouge.

#### **En cas d'erreur générale:**

- Réinitialisez le dispositif en le débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes puis rebranchez. Essayez ensuite de mettre en marche après réinitialisation.
- Dans le cas de retard dans l'émission de l'impulsion après avoir déplacé le dispositif sur une zone

différente, vous devrez envisager de réaliser le soin dans un environnement plus frais. Le dispositif peut être plus lent dans la délivrance des impulsions dans un environnement chaud.

- En présence de débris ou de souillures sur la fenêtre de soin, vous serez conduit à la nettoyer selon la manière décrite au chapitre Nettoyage. Si celle-ci ne suffit pas à obtenir un résultat, contactez notre service clientèle.

Si le problème n'est pas résolu, contactez notre service client.

## **Service clientèle**

Pour obtenir des informations complémentaires sur le dispositif, si votre dispositif est cassé ou ne fonctionne plus, que vous réclamez une assistance supplémentaire, prenez contact avec nous.

 **+44 0800-923-4833**

 **supportUK@sensica.com**

## Paramètres et spécifications du dispositif

### Fabriqué par:

ELG trade Ltd.

### Spectre lumineux émis:

475 [nm] à 1 200 [nm] max.

### Flux d'énergie émis:

5 [J/cm<sup>2</sup>]

### Différents niveaux d'énergie:

3 niveaux

### Zone de soin (fenêtre):

3 [cm<sup>2</sup>]

### Vitesse:

1 flash toutes les 3 secondes;

### Tension d'entrée:

100-240 [VAC]

### Fréquence du CA d'entrée:

50-60 [Hz]

### Tension de sortie:

12[V]

### Courant de sortie:

1.8[A]

### Puissance de sortie:

21.6W

### Rendement moyen en mode actif:

87.1%

### Rendement à faible charge (10%)

81.9%

### Poids et dimensions du dispositif:

220 [g], 135[mm] X

45[mm] X 75[mm]

7.8 [Oz], 5.3 X 1.77 X 2.96 [in]

### Technologie:

IPL à usage domestique

### Consigne de rangement

---

#### Rangement et conditions de transport

---

Température	-10°C à 70°C (14°F à 158°F)
-------------	--------------------------------

Humidité	Φ 0% à 90% à 55°C/131°F
----------	----------------------------

Pression	Sans condensation
----------	----------------------

---

#### Conditions de fonctionnement

---

Température	10°C à 40°C (50°F à 104°F)
-------------	-------------------------------

Humidité	Humidité Relative 30% à 70%
----------	-----------------------------------

---

Altitude maximale de fonctionnement	10 000 ft.
-------------------------------------	------------

---

## Étiquetage

Référence du modèle: IPL030EU



Double isolation



Consultez les consignes d'utilisation



Déchet électrique et électronique



Tenir à l'écart des yeux



Veuillez lire tous les avertissements et mises en garde avant toute utilisation



N'utilisez pas le dispositif sur des peau sensibles bronzées ou après une exposition au soleil



Ne laissez pas le dispositif devenir humide. Tenir à l'écart des baignoires, douches, lavabos et autre récipient contenant de l'eau: À conserver au sec



---

N'utilisez le dispositif qu'avec l'alimentation externe et les accessoires fournis. Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'adaptateur d'alimentation DC qui n'ait été approuvé par le fabricant. En cas d'endommagement du câble souple externe, celui ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.

---

## Garantie commerciale

### Contenu et durée de la garantie - cas d'exclusion:

Si vous constatez un dysfonctionnement dans les deux années qui suivent l'achat de votre appareil auprès de votre revendeur, Home Beauty Sense vous informe qu'elle a accordé pour votre produit audit revendeur une garantie commerciale de deux (2) années, qui court à compter de la date d'achat de votre produit auprès de ce dernier. Le revendeur vous fera donc bénéficier de cette garantie. En cas d'achat de votre produit auprès de Home Beauty Sense, cette garantie commerciale vous est accordée directement par Home Beauty Sense. Veuillez-noter que la garantie commerciale ne s'applique ni aux accessoires des produits, ni aux ustensiles fournis avec les produits, ni aux consommables.

La garantie commerciale, concerne les produits vendus par Home Beauty Sense au revendeur ou par Home Beauty Sense à vous-même, et couvre-

leur(s) défaut(s) ayant pour origine un phénomène électrique, électromécanique, électronique ou mécanique interne à l'appareil. Les éventuelles conséquences, directes ou indirectes de ces défauts, ne sont pas prises en charge par la garantie commerciale.

La garantie ne s'appliquera pas si les réclamations sont consécutives : à une utilisation commerciale, professionnelle ou collective ; à des causes d'origines externes (telles que foudre, inondation, humidité, incendie, usure, présence de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil) ; à une faute du revendeur ou de l'utilisateur final ; à des vérifications, des nettoyages ou à des essais non consécutifs à des dommages garantis ; à des pannes liées à un choc ou à une chute de l'appareil ; à des pannes liées et/ou localisées sur des accessoires, des ustensiles, des consommables, ne bénéficiant pas de la garantie commerciale ; à une casse ; à des réglages nécessaires, accessibles à l'utilisateur sans démontage de l'appareil. Les événements intervenants au titre de la

garantie (ex. remplacement ou remboursement) n'ont pas pour objet de proroger cette dernière. De même, toute garantie complémentaire consentie par le revendeur n'engage pas Home Beauty Sense.

**Territoire:** La garantie est valable uniquement dans le ou les pays dans le(s) quel(s) Home Beauty Sense commercialise ses produits auprès de ses revendeurs (France et Suisse), Home Beauty Sense ne disposant pas d'une organisation de services après-vente au-delà de ce(s) pays, ou en cas de vente directe de la part de Home Beauty Sense.

**Modalités de mise en œuvre de la garantie – Contact de votre garant:**

Si le produit ne fonctionne pas, avant toute demande de mise en jeu de la garantie, lisez les instructions pour vérifier sa bonne utilisation figurant dans la notice d'utilisation. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur, dont le nom et l'adresse figurent sur votre facture ou votre ticket de caisse, ou bien Home Beauty Sense en cas d'achat direct auprès de cette

dernière (Adresse SAV Home Beauty Sense : [contact@homebeautysense.com](mailto:contact@homebeautysense.com).)

Dans la mesure où Home Beauty Sense n'assure aucunement la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits vendus, la garantie commerciale donnera lieu, au choix d'Home Beauty Sense, soit à un remplacement du produit, soit au remboursement de ce dernier. En cas d'achat du produit auprès d'un revendeur, ce choix sera porté à la connaissance de ce dernier par Home Beauty Sense. Cette garantie commerciale ne pourra être mise en œuvre, selon les conditions et modalités ici définies, que pour autant que ces dernières soient strictement respectées. Dans le cadre de cette garantie, les frais de transport « aller » sont à votre charge et, en cas de remplacement de votre produit, les frais de transport « retour » sont à la charge du revendeur ou de Home Beauty Sense en cas de vente directe. Le produit ne doit pas être retourné à votre revendeur ou à Home Beauty Sense en cas de vente directe,

sans une demande d'accord préalable de votre revendeur ou d'Home Beauty Sense et d'un accord de ces derniers.

Le présent document tient lieu de contrat écrit au sens de l'article L. 211-15 du Code de la consommation, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

Indépendamment de la garantie commerciale, votre vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Article L. 211-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande

d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

français